


7

Solutions pour se prémunir du retour du médicament vers la ligne de perfusion par gravité

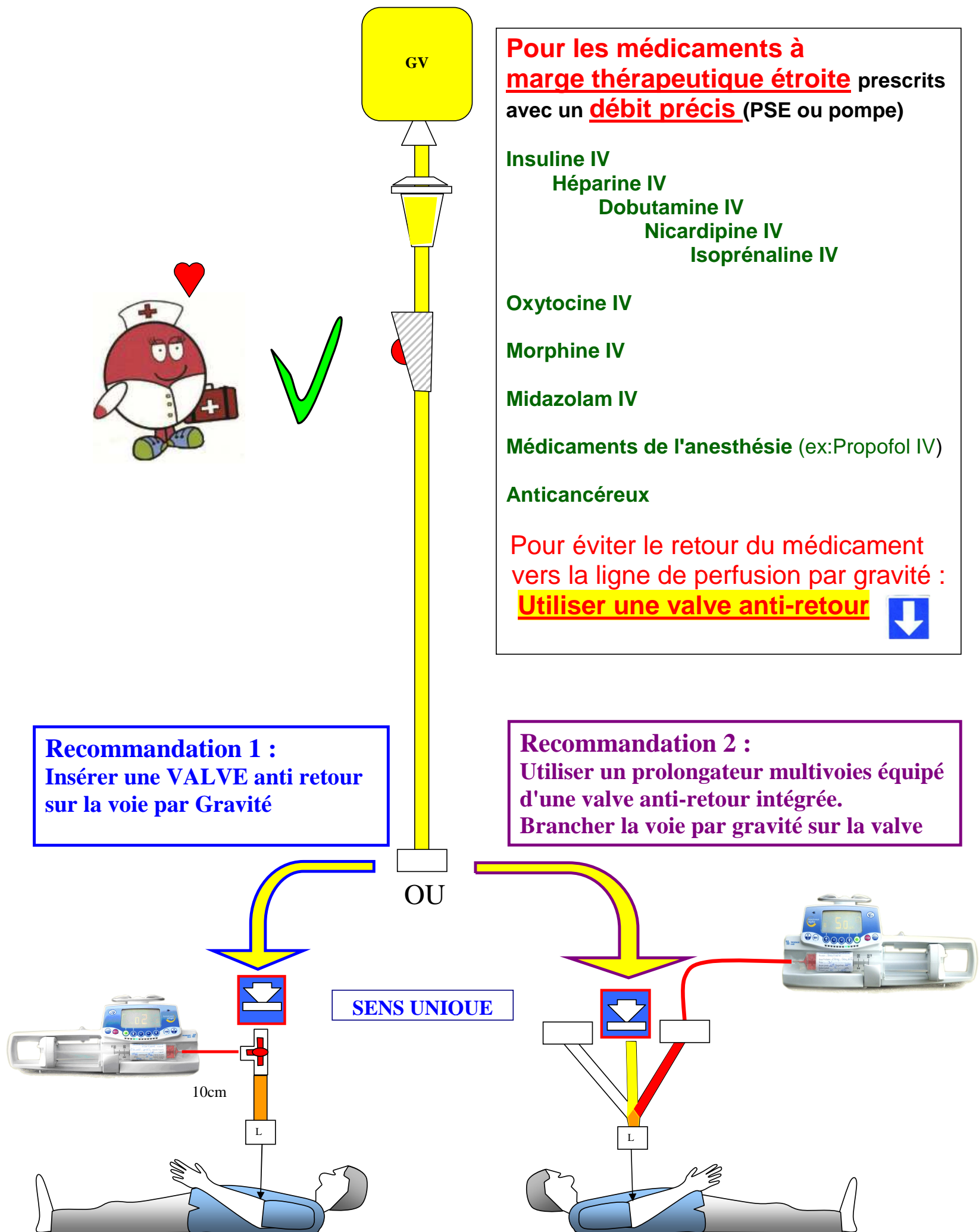

La **valve anti-retour** ou anti reflux est un **dispositif** qui ne permet la circulation de liquide que dans un seul sens (tout reflux est impossible).

Le débit est à sens unique.

En plaçant la valve **sur la ligne par gravité**, le principe actif administré avec un PSE ou une pompe ne peut pas remonter vers la poche (ligne gravitaire).

En cas d'obstruction, comme le principe actif administré par pousse-seringue ou par pompe n'a pas la possibilité de remonter vers la poche par gravité, la pression du circuit augmente et l'alarme du PSE ou de la pompe est déclenchée.